

ELLISYS SENSE



YENİ NESİL **FRAKSİYONEL** **RADYOFREKANS** **MİKRO İĞNE** SİSTEMİ



aysberk
medikal estetik spa
CONCEPT

FRAKSİYONEL RADYOFREKANS

ELLISYS SENSE Fraksiyonel Radyofrekans Cilt yenileme ve gençleştirme için, altın kaplama mikro iğneler ile dermis ve epidermise kontrollü olarak radyofrekans enerjisi yayan bir sistemdir. Cilt altındaki elastin ve kolajen lifler uyarılarak tekrardan hücre yenilenmeleri sağlanır. Ellisys Sense , 0.5 – 8.2 mm.arası derinliklere sabit radyofrekans enerjisini hedef derinliğe ve cildin tüm katmanlarına yüksek hassasiyetle ileterek, epidermis ve dermisdeki problemleri aynı anda tedavi edebilme imkanı verir. Akıllı Çift Atış ve Akıllı Vakum teknolojisi sayesinde daha etkili, hızlı, acısız, güvenli uygulama imkanı sunar. Yanık, pigmentasyon ve yan etki oluşturmaz.

ENDİKASYONLAR

- Ameliyatsız Yüz Germe ve Sıkılaştırma
- Kırışıklık Azaltma ve Cilt Gençleştirme
- Boyun ve Gıdı Toparlama
- Göz Çevresi Kırışıklıkları
- Göz Torbası Uygulaması
- Siringoma, Milia, Siyah Nokta Uygulaması
- Gözenek Azaltma
- Sebum Dengelenmesi
- Akne ve Akne İzleri Uygulaması
- Cilt Yenileme, Renk açma
- Pigmente Lezyon Uygulaması
- Yara İzi Uygulaması
- Cilt Çatlakları Uygulaması
- Kol Sarkmalarının Giderilmesi
- Vücut Sıkılaştırma



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Smart Double Shot (Akıllı Çift Atış) teknolojisi ile Rf enerjisini tek bir atışta iki cilt katmanına verir.
- Smart Vakum (Akıllı Vakum) teknolojisi ile hassas temas ve optimum enerji iletimi sağlanır.
- Her cilt ihtiyacına göre, özel RF enerji seçeneği verir. (1 MHz – 2 Mhz)
- Seçilebilir RF Modları (Monopolar RF – Bipolar RF).
- 2 ayrı başlık, 5 ayrı başlık ucu (1, 14, 25,36, 49 iğneli) ile endikasyona özel tedavi imkanı sunar.
- Otomatik mod ile RF yoğunluğu, emisyon zamanı, iğne derinliği otomatik olarak ayarlanabilir, kolay ve hızlı işlem yapma imkanı sağlanır.
- 0,1 mm'lik çok hassas kademelerle 0.5 ile 8.2 mm derinlik aralığı.
- Deri direncini en aza indirdiği için daha az ağrılı 0.3 mm mikro iğne aralığı.
- Benzersiz Duty Parametresi (atışların alt atışlara bölünmesi) ile daha az ağrılı ve etkili uygulama yapılır.
- Ön Isıtma teknolojisi ile cilt ve iğneler tedavi öncesi hafifçe ısıtılır ve iğnelerin cilde girişinde daha az ağrı hissedilir.
- Dahili LED Terapisi ile led ışınları cilt altındaki hücreleri uyarak cilt yenilenmesini destekler.
- Hem yalıtımlı hem de yalıtımsız iğne seçenekleri.
- EO gazıyla sterilize edilmiş iğne ve başlık.
- FDA onaylı.

SMART DOUBLE SHOT (AKILLI ÇİFT ATIŞ)

RF enerjisi, tek bir atımda cildin farklı katmanlarından iki iğne iletilir. Böylece daha etkili sonuç, daha az ağrı ve zaman tasarrufu sağlanır.

SMART VAKUM (AKILLI VAKUM)

- Hassas Temas
- Kaş altı bölgesine etkili çalışma imkanı
- Optimal Enerji Aktarımı
- Ciltle sıkı temas sağlayarak iğne derinliğini doğru ayarlar ve enerjiyi tutarlı şekilde iletir.
- Göz çevresi, dudaklar ve boyun gibi sarkmaya yatkın bölgeler için etkili uygulama sağlar.

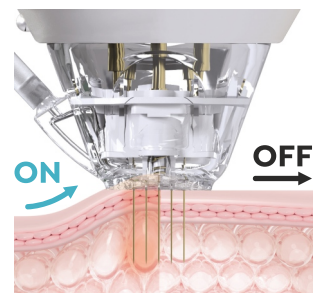

DUAL ENERJİ (1 MHz / 2 MHz)

1 MHz

1 MHz

- Derin penetrasyon
- Artırılmış kolajen üretimi
- Cilt sarkmalarında iyileşme
- Daha kalıcı sonuçlar
- Sarkık cilt, derin kırışıklıklar ve alt göz torbanmalarında etkili uygulama

2 MHz

2 MHz

- Yüzeysel uygulama
- Hassas kontrol
- Daha hızlı iyileşme süresi
- Yüzeysel yara izleri, geniş gözenekler ve akne tedavisinde idealdir.



SEÇİLEBİLİR RF MODLARI

MONOPOLAR RF:

Gözenekler, akne ve siyah noktaları hedefleyerek daha derin katmanları ısıtır.

BİPOLAR RF:

Epidermis ve dermisi hedef alarak yüz genelinde sıkılaştırma, kontur belirginliği ve yüzey yenilenmesi sağlar.

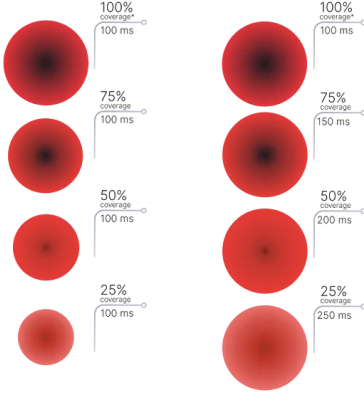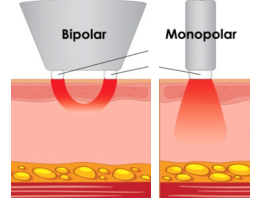

DUTY PARAMETRESİ

RF teknolojilerinde bir ilk olarak kullanılan Duty parametresi, cihazın uygulama yaptığı süre boyunca enerjinin ne kadar süreyle aktif olarak verildiğini belirten bir orandır. Genellikle yüzde (%) olarak ifade edilir.

Bu özellik sayesinde:

- Verimlilikten ödün vermeden ağrıyı azaltmak
- Etki noktasının merkezinde aşırı ısınmayı önlemek
- Kuru ve susuz kalmış ciltte yanık riski olmadan çalışmak
- Pigmentasyonları gidermek
- İz ve lekeleri ortadan kaldırmak

* Farklı seviyelerde boyut ve ısı dağılımı

ÖN ISITMA TEKNOLOJİSİ


Tedavi öncesi cilt ve iğneler hafifçe ısıtılır, böylece iğnelerin cilde girişinde daha az ağrı hissedilir. Ayrıca ısı, ciltteki kan dolaşımını artırarak tedavi etkinliğini destekler.

DAHİLİ LED TERAPİSİ

Her tedavi ucunda bulunan LED ışık terapisi, cilt yenilenmesini destekler. LED ışınları, cilt altındaki hücreleri uyarak kolajen üretimini teşvik eder, böylece tedavi sonrası iyileşme sürecini hızlandırır ve cilt dokusunun kalitesini artırır.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Cihaz ekranında görünen cilt bölümlerine dokunulduğunda tüm parametreler otomatik olarak verilir.

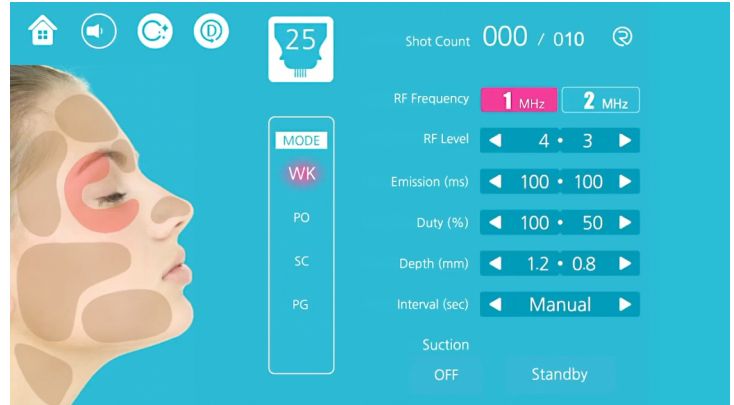

ÇEŞİTLİ İĞNE UÇLARI

YÜZ

1 iğneli
(yalıtlımlı)




Max. 5.0 mm

14 iğneli
(yalıtlımsız)




Max. 3.5 mm

25 iğneli
(yalıtlımlı)

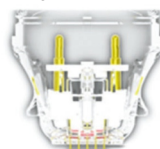

Max. 3.5 mm

49 iğneli
(yalıtlımsız)

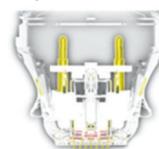

Max. 3.5 mm

VÜCUT

36 iğneli
(yalıtlımlı)



Max. 8.2 mm

ÖNCESİ / SONRASI

BOYUN LİFTİNGİ & SKAR




GÖZENEK & AKNE



AKNE SKAR & PİGMENTASYON




KULAK ÖNÜ KIRIŞIKLIĞI

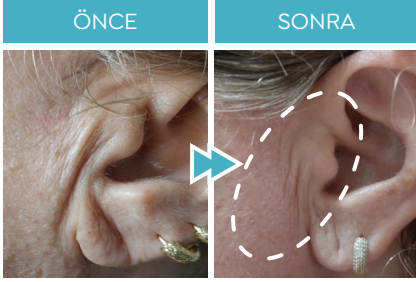


AKNE



ÜST KOL LİFTİNGİ & PİGMENTASYON

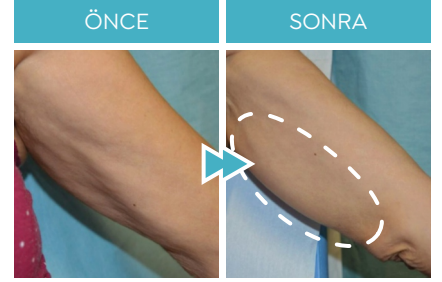

AMELİYAT SONRASI İZ

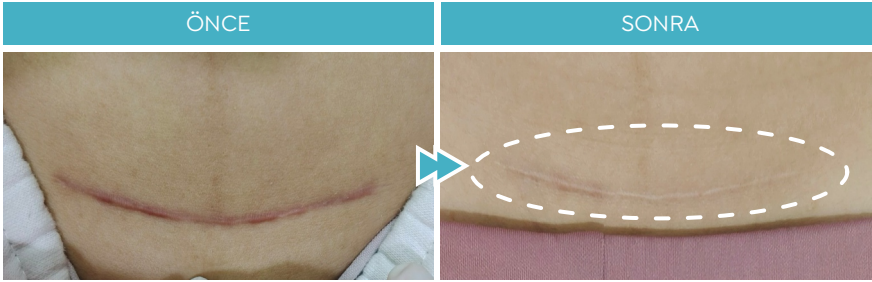

KALÇA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Ellisys Sense (CWM-930S)
Güç	70 W
Frekans	1-2 MHz
Voltaj	50/60 Hz
Vakum	Ayarlanabilir
RF Seviyesi	1-10
RF Çıkış Süresi	10 - 900 ms
Aralık Süresi	0,3 sn, 0,5 sn, 1,0 sn, 1,5 sn, 2,0 sn, 2,5 sn, 3,0 sn
İğne Derinliği	5.0 mm Monopolar / 3.5 mm (Yüz) Bi-polar
	8,2 mm Vücut Bi-polar
Boyutlar (G x D x Y)	365 x 505 x 1155/1550 mm
Ağırlık	37 kg



Berk Spa Estetik Medikal Kozmetik İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Bulv. Altinkum Mah. 428. Sok. No: 4/301 Eryılmaz İş Merk. Konyaaltı/Antalya
Tel: 0242 230 30 49 Fax: 0242 230 24 48

Büyükdere Cad. Fulya Mah. No: 26/12 Gün Apt. Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul
Tel&Fax: 0212 216 82 43

www.aysberkkozmetik.com | info@aysberkkozmetik.com | [f aysberkmedikal](https://www.facebook.com/aysberkmedikal) | [i aysberkmedikal](https://www.instagram.com/aysberkmedikal)

